

Аппарат динамической электростимуляции и электромассажа

ДЭНАС®·Вертебра

Инструкция по эксплуатации



КОРПОРАЦИЯ
ДЭНАС МС

Благодарим вас за приобретение аппарата ДЭНАС-Вертебра.

Мы надеемся, что аппарат поможет вам сохранить хорошее здоровье на долгие годы.

Аппарат ДЭНАС-Вертебра предназначен для проведения динамической электростимуляции и электромассажа области спины, а также для обезболивания и коррекции функциональных нарушений при заболеваниях различных органов.

Аппарат предназначен для применения в лечебно-профилактических учреждениях и в бытовых условиях в соответствии с указаниями врача.

1 Разместите аппарат на твердой и ровной устойчивой поверхности, например на кушетке, по длине и ширине соответствующей вашим размерам, или на полу.



2 Накройте электродную поверхность блока электростимуляции защитной простыней.



3

Включите аппарат кнопкой




4

Выберите программу
воздействия, нажимая кнопку
необходимое количество раз.



	Зона воздействия	Показания	Продолжительность
A	Область спины на всю длину позвоночника	<ol style="list-style-type: none"> 1. Лечение, реабилитация, вторичная профилактика хронических заболеваний. 2. Профилактика и лечение стресса. 3. Повышение общих адаптационных возможностей организма 	23 ± 1 мин.
B	Область спины на уровне шейного, грудного или пояснично-крестцового отделов позвоночника, по выбору	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выраженная локализованная боль в области спины, связанная преимущественно с поражением позвоночника и мышц спины. 2. Спастическая боль при заболеваниях внутренних органов. 3. Реабилитация в послеоперационном периоде 	23 ± 1 мин.
C	Область спины на уровне шейного, грудного или пояснично-крестцового отделов позвоночника, по выбору	<ol style="list-style-type: none"> 1. Умеренные и слабые боли в области спины, связанные с заболеваниями позвоночника. 2. Хронические болевые синдромы при заболеваниях позвоночника и внутренних органов 	26 ± 1 мин.
D	Воздействие на выбранную область спины, имеющую малую площадь (режим аппликатора)	<p>Неотложная помощь при острой боли в спине, связанная с поражением позвоночника и/или спинномозговых нервов.</p> <p>Повышение эффективности других программ</p>	10 ± 1 мин.

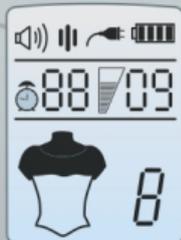

Программа B



Программа C



Программа D

5

Выберите зону воздействия,

нажимая кнопку



необходимое количество раз

(доступно для программ B, C, D).




6

Удобно разместитесь на модуле.

При наличии хорошего контакта электродов с кожей в выбранной вами зоне на индикаторе появится символ контакта с кожей 

Для начала сеанса и установки мощности воздействия используйте кнопки

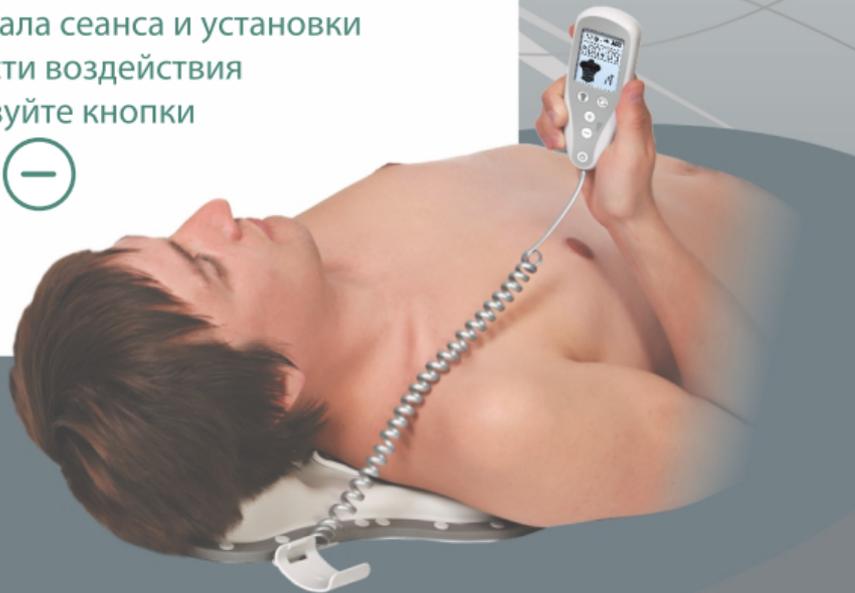

7

Уровень громкости звуковой сигнализации устанавливается одновременным нажатием двух кнопок:



8

По завершению программы аппарат подаст звуковой сигнал и прекратит электростимуляцию.

В случае желаниа продолжить сеанс повторите указанные в инструкции действия, начиная с пункта 4.

В ином случае выключите аппарат кнопкой .

После процедуры рекомендуется спокойный отдых в течение 10–15 минут.

Удалите салфетку и обработайте электродную поверхность блока электростимуляции стандартным средством дезинфекции (например, 3% раствором перекиси водорода).





620146, Россия, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 15
телефон: +7 (343) 267-23-30
<http://www.denascorp.ru>, e-mail: corp@denascorp.ru

Телефон бесплатной горячей линии:
8-800-200-1919 (звонок по России бесплатный)

13.0-03.71-02