

ООО «РЦ АРТ»
Екатеринбург, Россия

**Аппарат динамической
электростимуляции и электромассажа**

ДЭНАС®·Вертебра·02

Руководство по эксплуатации

Россия/ Russia	●
ЕС, все страны/ EU, all	
США/ USA	
Канада/ Canada	

РЦ АРТ 13.0-03.70-01 РЭ
ТУ 9444-013-44148620-2010

Регистрационное удостоверение Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития № ФСР 2010/08179 от
06.07.2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Правила безопасности.....	4
2. Назначение изделия.....	7
3. Общие сведения о методе, используемом в аппарате.....	8
4. Описание изделия.....	9
5. Показания и противопоказания к применению.....	11
6. Условия и порядок проведения лечения.....	16
7. Техническое обслуживание и порядок замены источников питания.....	23
8. Возможные неисправности и способы их устранения.....	25
9. Техническая информация.....	27
10. Комплектация.....	29
11. Гарантии изготовителя.....	30
12. Адрес предприятия-изготовителя.....	32
Талон на гарантийный ремонт.....	33
Свидетельство о приемке.....	36

Благодарим вас за приобретение аппарата ДЭНАС®-Вертебра-02.

Мы надеемся, что аппарат поможет вам сохранить хорошее здоровье на долгие годы.

Для того чтобы применение аппарата было эффективным и безопасным, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми разделами данного руководства.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Обратите внимание на всю информацию, отмеченную этим знаком. Она важна для обеспечения безопасного и эффективного использования аппарата.



Информация, содержащаяся в руководстве по эксплуатации, важна для вашей безопасности и для правильного использования и ухода за аппаратом.



Аппарат электробезопасен, т. к. в нем используется источник тока низкого напряжения, изолированный от рабочей части аппарата (изделие типа В с рабочей частью типа F).



Аппарат нельзя использовать для лечения пациентов, имеющих имплантированные электронные устройства (например, кардиостимуляторы), и для лечения пациентов с индивидуальной непереносимостью электрического тока.



Запрещается применять аппарат в области прямой проекции сердца спереди.



Во время стимуляции не следует подключать пациента к какому-либо высокочастотному электрическому прибору. Одновременное использование аппарата и другого электрооборудования может привести к ожогам и возможному повреждению аппарата.



Работа вблизи коротковолнового или микроволнового оборудования может вызвать нестабильность выходных параметров аппарата.



Запрещается использование источников питания, отличных от указанных производителем. Подключение несоответствующих источни-

ков питания может вызвать выход аппарата из строя, а также поражение пользователя электрическим током.



Запрещается деформировать модуль электро-стимуляции.



Изделие содержит хрупкие элементы. Предохраняйте его от ударов.



Избегайте длительного нахождения аппарата под воздействием прямых солнечных лучей при высокой (>25 °C) температуре воздуха. Это может вызвать выход из строя индикатора аппарата либо разрушение элементов питания.



Аппарат не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.



Все работы по ремонту изделия должны проводить квалифицированные специалисты на предприятии-изготовителе.




Внимание! Перед использованием аппарата убедитесь, что напряжение сети соответствует требованиям источника питания. Запрещено использовать сетевой источник питания при несоответствии параметров сети.




Внимание! Избегайте падения аппарата и его отдельных частей (пульт управления, сетевой источник питания).




Внимание! Если пациент проходит курс другого физиотерапевтического лечения, использование аппарата возможно только по согласованию с лечащим врачом.

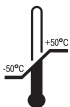

Условия транспортирования: температура от -50 до +50 °С, относительная влажность воздуха от 30 до 93 %, атмосферное давление от 70 до 106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.).

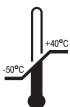

Условия хранения: температура от -50 до +40 °С, относительная влажность воздуха от 30 до 93 %, атмосферное давление от 70 до 106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.).

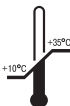

Условия эксплуатации: температура от +10 до +35 °С, относительная влажность воздуха от 30 до 93 %, атмосферное давление от 70 до 106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.).



Внимание! Если аппарат хранился при температуре окружающего воздуха ниже 10 °С, выдержите его в нормальных климатических условиях не менее двух часов перед использованием.



Утилизация: материалы упаковки аппарата не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, их можно использовать повторно.



Отдельный сбор электрического и электронного оборудования.



Внимание! Аппарат содержит ценные материалы, которые могут быть вторично использованы после утилизации с учетом требований охраны окружающей среды. Их следует сдать в специально предназначенные места (проконсультируйтесь в соответствующих службах вашего района) для сбора и переработки.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Аппарат ДЭНАС-Вертебра-02 предназначен для проведения динамической электростимуляции и электромассажа путем воздействия на различные зоны и области спины, а также для обезболивания и коррекции функциональных нарушений при заболеваниях различных органов.

Аппарат предназначен для применения в лечебно-профилактических учреждениях и в бытовых условиях в соответствии с указаниями врача.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОМ В АППАРАТЕ

Одним из наиболее перспективных направлений современной медицины является использование физиотерапии для лечения и реабилитации. В настоящее время широкое распространение получают комплексные технологии, такие как ДЭНС (динамическая электронейростимуляция). Метод заключается в лечебном воздействии короткими биполярными асимметричными импульсами тока, форма которых изменяется в зависимости от электрического сопротивления тканей в подэлектродной зоне. Безопасный, простой и имеющий минимальное количество противопоказаний метод ДЭНС находит применение в лечении широкого круга заболеваний. В настоящее время ДЭНС с успехом применяется во многих областях медицины, опубликованы многочисленные данные о положительных результатах применения ДЭНС при различных заболеваниях у взрослых и детей. Кроме того, специально подобранные в аппарате ДЭНС-режимы стимуляции позволяют моделировать массажный эффект за счет сокращения мышц. Эффекты и ощущения во время электромассажа сравнимы с ручным массажем, а зачастую превосходят его в следствие более глубокой проработки мышц.

4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

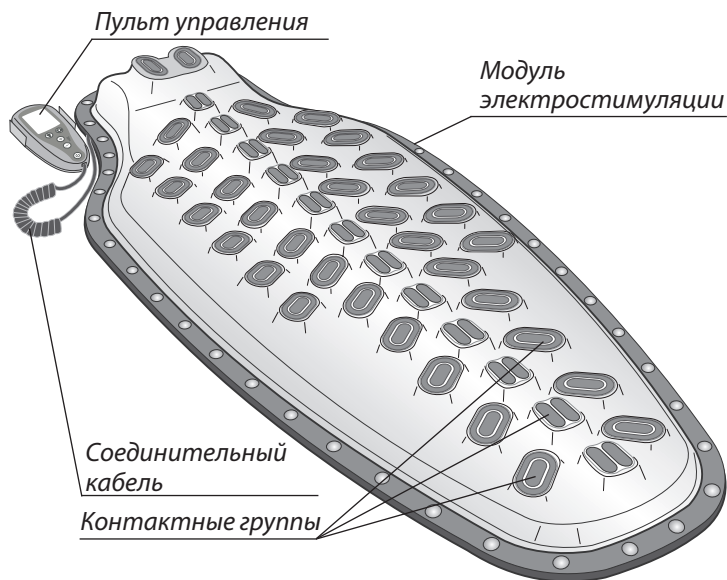


Рис. 1. Изделие в сборе. Вид сверху

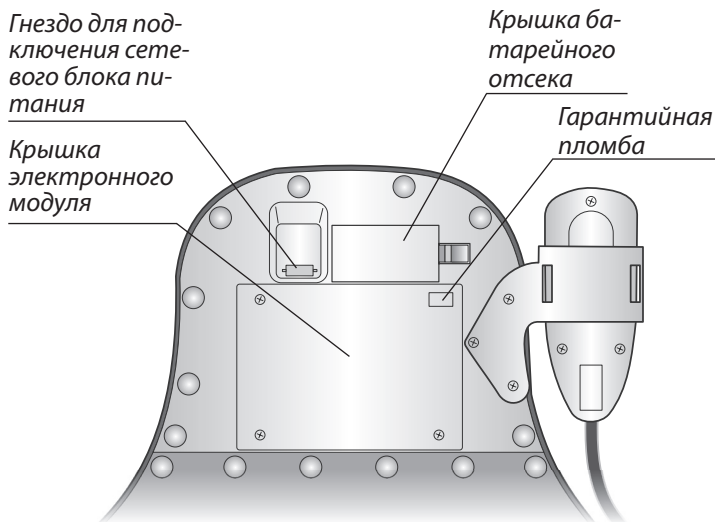


Рис. 2. Модуль электростимуляции
(вид снизу части, содержащей электронный блок)

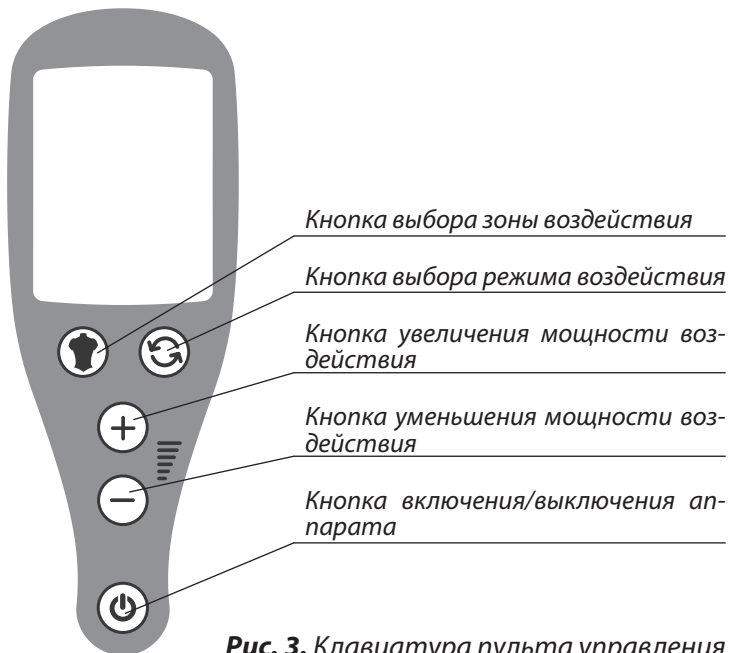


Рис. 3. Клавиатура пульта управления

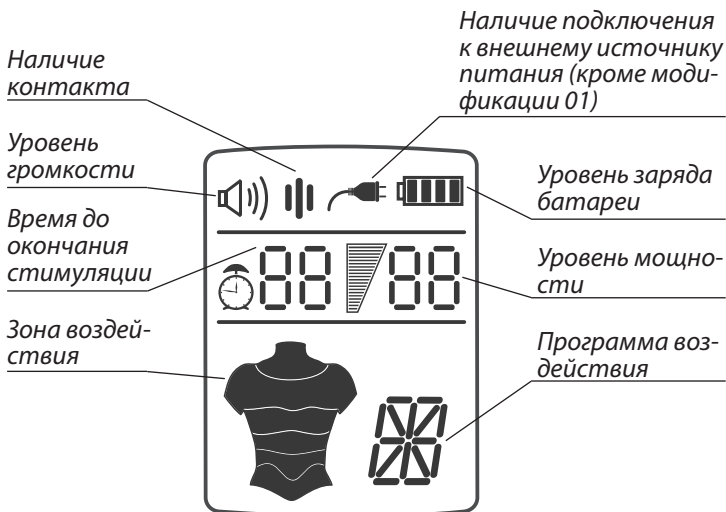


Рис. 4. Назначение символов на индикаторе аппарата

5. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Общее назначение аппарата

Аппарат может применяться в следующих случаях:

- как основной метод лечения при непереносимости лекарственных средств и противопоказаниях к применению других методов;
- как компонент комплексной терапии с целью усиления эффекта основной лекарственной, гомеопатической, мануальной терапии, а также психотерапии и других методов лечения;
- как симптоматическое лечение при различных заболеваниях и синдромах.



Внимание! *Первым и нередко единственным признаком серьезного заболевания может являться внезапно возникшая боль любой локализации. Поэтому, если приступы боли возникают впервые и повторяются, а интенсивность боли усиливается, необходима срочная консультация врача.*



Внимание! *Применение аппарата не исключает необходимости применения других методов лечения, назначенных врачом.*



Внимание! *Формируемое аппаратом воздействие не является лечебным массажем.*

Показания к применению:

- острые и хронические болевые синдромы при заболеваниях позвоночника, суставов, мышц;
- обезболивание и коррекция функциональных расстройств при заболеваниях внутренних органов;
- реабилитация после перенесенных заболеваний,

- хирургических вмешательств, травм;
- повышение адаптационных возможностей организма при физическом и умственном переутомлении.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость;
- наличие имплантированного кардиостимулятора;
- эпилептический статус;
- новообразования любой этиологии и локализации;
- тромбозы вен;
- острые лихорадочные состояния неясной этиологии;
- состояние острого психического возбуждения алкогольного или наркотического происхождения.



Внимание! В случае наличия вышеперечисленных противопоказаний о возможности применения аппарата необходимо проконсультироваться с врачом.



Внимание! Запрещено применять аппарат в области прямой проекции сердца спереди.



Внимание! Запрещается использование аппарата при наличии нарушений целостности кожи (раны, кожные заболевания) в зоне воздействия.



Внимание! Отсутствуют контролируемые исследования о применении аппарата у беременных, поэтому аппарат должен применяться только в случаях крайней необходимости по согласованию с лечащим врачом.

Программы аппарата

Про- грам- ма	Основная зона воздей- ствия	Сфера применения	Время ра- боты про- граммы (мин.)
1	2	3	4
А	Область спи- ны на всю длину позво- ночника	<ol style="list-style-type: none"> 1. Лечение, реабилита- ция, вторичная профи- лактика хронических за- болеваний. 2. Профилактика и лече- ние стресса. 3. Повышение общих адаптационных возмож- ностей организма при напряженной физиче- ской и умственной ра- боте; физическом и ум- ственном переутомле- нии; синдроме хрони- ческой усталости; за- труднении пробужде- ния по утрам и сонливо- сти днем; нарушении за- сыпания вечером и бес- соннице; повышенной раздражительности; на- рушениях сексуальной функции 	23 ± 1
В	Область спи- ны на уров- не шейного, грудного или поясничного отделов по- звоночника по выбору	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выраженная локали- зованная боль в области спины, связанная преи- мущественно с пораже- нием позвоночника и мышц спины. 2. Спастическая боль при заболеваниях внутрен- них органов. 3. Реабилитация в после- операционном периоде 	23 ± 1

1	2	3	4
C	Область спины на уровне шейного, грудного или поясничного отделов позвоночника по выбору	Умеренные и слабые боли в области спины, связанные с заболеваниями позвоночника. Функциональные нарушения, связанные с перенапряжением мышц спины: усталость, «забитость» мышц и т. п. Хронические болевые синдромы при заболеваниях позвоночника и внутренних органов. Коррекция функциональных нарушений при заболеваниях внутренних органов. Лечение, реабилитация на всех этапах, профилактика хронических заболеваний позвоночника	26 ± 1
D	Воздействие на выбранную область спины малой площади (режим аппликатора)	Неотложная помощь при острой боли в спине, связанная с поражением позвоночника и/или спинномозговых нервов. Повышение эффективности других программ	10 ± 1



Внимание! Запрещено использовать программы А, В, С у пациентов с мочекаменной болезнью ввиду риска отхождения камней. При использовании программы D запрещено применять аппарат в области поясницы у пациентов с мочекаменной болезнью.



Внимание! Если в перечне показаний отсутствуют данные о каком-либо заболевании, то для назначения аппарата рекомендуется обратиться к специалисту.



Внимание! Не рекомендуется использовать аппарат в течение более 40–50 мин. за один сеанс. Превышение времени допускается только при наличии предварительного заключения врача.

Результативность лечения

При применении аппарата необходимо учитывать, что наиболее выраженный лечебный эффект наступает в результате проведения курсового лечения. Его продолжительность составляет для одних заболеваний 6–8 процедур, для других 8–12, реже 14–20 процедур. Суммарный лечебный эффект отдельных процедур обеспечивает также длительное последствие курса лечения, которое продолжается и по его завершении, а в некоторых случаях отдаленные результаты даже более значимы, чем непосредственные. Но необходимо помнить, что продолжительное непрерывное использование одного физического фактора увеличивает адаптацию к нему и может снижать эффективность лечения. Кроме этого, вероятностный характер физиологических процессов в организме обуславливает у незначительной части (5%) людей недостаточную эффективность или отсутствие благоприятных реакций от применения лечебных факторов.



Внимание! В случае ухудшения самочувствия на фоне лечения следует проконсультироваться с врачом.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

6.1. Общие положения

Для проведения процедур с использованием аппарата ДЭНАС-Вертебра-02 специальных условий не требуется. Аппарат должен быть размещен в теплом помещении на твердой ровной поверхности (медицинская кушетка, пол), по длине и ширине соответствующей размерам пациента. После проведения процедуры рекомендуется спокойный отдых в течение 10–15 минут.

После выбора необходимой программы пациент укладывается спиной на модуль электростимуляции таким образом, чтобы верхние парные электроды размещались в области шеи немного ниже линии роста волос, а центральные электроды прилегали к коже в области позвоночника.

Автоматизация процесса лечения обеспечивает простоту и удобство проведения процедур. Во время сеанса происходит переключение электродов и частоты стимуляции в порядке, заданном программой. Сочетание определенной скорости переключения и частоты воздействия обеспечивает моделирование массажного эффекта, который наиболее полно проявляется при использовании комфортного и максимального уровней мощности.

6.2. Определение интенсивности (мощности) воздействия

Определение интенсивности (мощности) электростимуляции осуществляется индивидуально, на основании субъективных ощущений. Мощность электростимуляции условно подразделяется на три уровня.

Первый, *минимальный уровень* — пациент не испытывает никаких субъективных ощущений или ощущает легкую вибрацию в области воздействия под электродами. Используется в тех случаях, когда воздействие не должно быть интенсивным — если пациенты страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, синдром вегето-сосудистой дистонии). Пациентам, у которых наблюдаются частые головные боли, головокружения, лечение необходимо начинать с минимального уровня мощности.

Второй, *комфортный уровень* — пациент ощущает вибрацию, приятное покалывание или легкое жжение, но ощущения не болезненные. Используется при слабых болях и болях средней интенсивности. Это наиболее часто используемый уровень мощности.

Третий, *максимальный уровень* — пациент ощущает болезненное покалывание или жжение. Такая интенсивность воздействия может сопровождаться непроизвольным сокращением мышц рядом с электродами. Применяется при выраженном болевом синдроме.



Внимание! На этапах лечения уровень мощности электростимуляции может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от изменения степени индивидуальной чувствительности пациента и по мере уменьшения боли.



Внимание! Контроль уровня мощности осуществляется субъективно, по ощущениям пациента. Не следует превышать порог болевой чувствительности.



Внимание! Пациентам с артериальной гипертензией, артериальной гипотензией, синдромом вегето-сосудистой дистонии, а также пациентам, у которых наблюдаются частые головные боли, головокружения, лечение необходимо проводить при минимальном уровне мощности.

6.3. Подготовка к проведению процедуры

Откройте потребительскую тару и достаньте аппарат. При отсутствии элементов питания в батарейном отсеке установите источники питания или подключите сетевой блок питания, как показано на рис. № 5 (при этом на индикаторе появится символ подключения аппарата к внешнему источнику питания). При установке источников питания соблюдайте полярность. Перед использованием аппарата, убедитесь, что на корпусе пульта управления а также на модуле электростимуляции отсутствуют следы падений, ударов, ЖК-индикатор не разбит, соединительный кабель не имеет повреждений. Убедитесь, что на электродах отсутствуют следы посторонних веществ, а также следы повреждений.

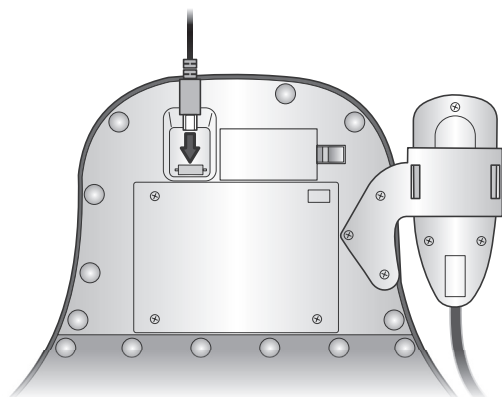


Рис. 5. Подключение сетевого блока питания



Внимание! Запрещается использовать аппарат при наличии на нем повреждений.




Внимание! Если аппарат находился в холоде или в условиях повышенной влажности, то перед использованием необходимо выдержать его не менее 2 часов в помещении при комнатной температуре.



Внимание! Перед первым применением с гигиенической целью обработайте электроды аппарата дезинфицирующим раствором (например, 3%-м раствором перекиси водорода).

6.4. Порядок проведения сеанса лечения

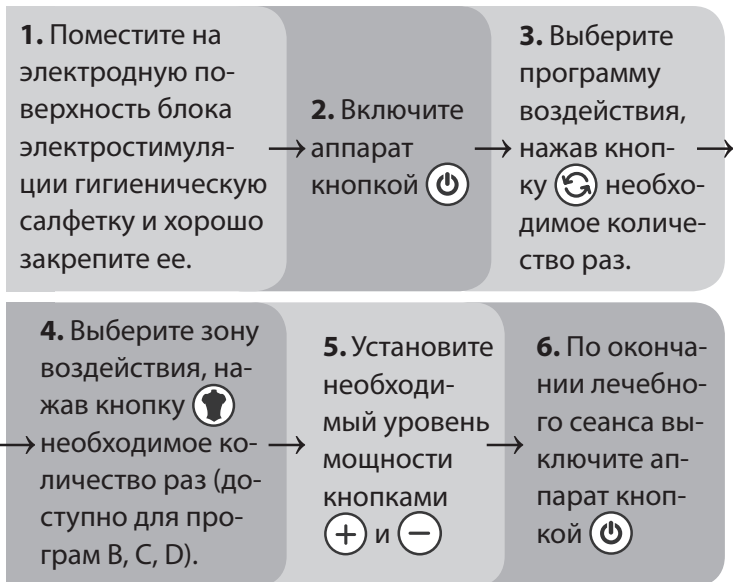


6.4.1. Включение аппарата

Подготовьте аппарат к проведению процедуры. Нажмите кнопку на пульте управления. Аппарат включится и перейдет в режим ожидания.


6.4.2. Размещение салфетки

Достаньте из упаковки одну салфетку, специально предназначенную для ДЭНАС-Вертебра-02. Разместите ее на электродной поверхности блока электростимуляции таким образом, чтобы отверстия салфетки полностью совпали с местами расположения электродных групп. Хорошо зафиксируйте салфетку, так чтобы электродные группы возвышались над поверхностью салфетки.


6.4.3. Выбор программы воздействия



Для выбора программы воздействия используйте кнопку . Программы в меню аппарата расположены в следующем порядке: Программа А → Программа В → Программа С → Программа D → Программа А...

6.4.4. Выбор зоны воздействия

Для программ, предполагающих необходимость выбора зоны воздействия (программы В, С и D), используйте кнопку . По умолчанию при включении на аппарате устанавливается программа А.

6.4.5. Установка мощности воздействия




Удобно разместитесь на модуле. При контактировании с кожей в выбранной вами зоне более чем 60% контактных групп на индикаторе аппарата появится символ наличия контакта с кожей .







Для начала сеанса и установки мощности воздействия используйте кнопки  и .

- однократное нажатие изменяет мощность на единицу;
- удержание кнопки в нажатом положении более 1 секунды приводит к непрерывному изменению мощности воздействия. При достижении желаемого уровня мощности отпустите кнопку. Начнется отсчет времени воздействия.


По окончании выполнения программы аппарат подаст звуковой сигнал и электростимуляция прекратится. Также аппарат подаст звуковой сигнал в случае, если более 5 секунд нет достаточного контакта электродов с кожей (меньше 60% контактных групп выбранной зоны).

6.4.6. Установка громкости

Для удобства использования вы можете регулировать уровень звуковой сигнализации. Аппарат позволяет работать без звука или установить два уровня громкости звуковых сигналов. Уровень громкости устанавливается одновременным нажатием двух кнопок:  и  или .

При выборе уровня громкости звуковых сигналов используйте для включения и увеличения громкости одновременное нажатие на комбинацию  и , а для уменьшения громкости или отключения звука одновременное нажатие на комбинацию кнопок  и . Уровень громкости отображается на индикаторе аппарата: изображение отсутствует; ; ).

6.4.7. Выключение аппарата

Нажмите и удерживайте кнопку  до отключения аппарата.

6.4.8. Завершение процедуры

С выключенного аппарата удалите салфетку и обработайте электродную поверхность блока электростимуляции стандартным средством дезинфекции (например, 3%-м раствором перекиси водорода). В случае если дезинфицирующим средством не удалось убрать все следы грязи, допускается обработка аппарата салфеткой без ворса, увлажненной нейтральным и неабразивным моющим средством.



Внимание! Отсутствие адекватной очистки элементов может привести к риску возникновения аллергических реакций либо перекрестного инфицирования при использовании аппарата несколькими людьми.



Внимание! В случае индивидуальной непереносимости, когда во время проведения сеанса наблюдается ухудшение самочувствия или после проведения сеанса возникает раздражение кожи, необходимо прекратить воздействие и срочно проконсультироваться с врачом.



Внимание! При возникновении аллергических реакций в области контакта аппарата с кожей следует прекратить использование аппарата и обратиться к специалисту.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Техническое обслуживание аппарата должно содержать следующие операции:


7.1. Внешний осмотр изделия. Необходимо убедиться, что отсутствуют следы ударов, падений, т. к. это может привести к некорректной работе аппарата.

7.2. Перед использованием аппарата, а также после использования обязательно проведение очистки электродов модуля электростимуляции. Отсутствие адекватной очистки может привести к возникновению аллергических реакций либо инфицированию кожи при применении аппарата несколькими пользователями. Для очистки используйте стандартные средства дезинфекции (например, 3%-й раствор перекиси водорода) и мягкие салфетки без ворса.


7.3. Если предполагается не использовать аппарат в течение длительного времени (более 3 дней) или использовать только через сетевой блок питания, необходимо извлечь источники питания из батарейного отсека. Это предотвратит их преждевременный разряд.

7.4. При мигании символа состояния батареи на ЖК-индикаторе необходимо заменить источники питания аппарата. Для этого:


- снимите крышку батарейного отсека, как показано на рис. № 6;
- извлеките использованные элементы питания;
- установите новые источники питания, соблюдая полярность;
- установите крышку батарейного отсека.

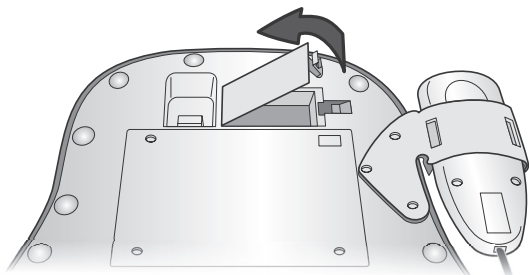

1. Снимите крышку батарейного отсека и извлеките использованные элементы питания.

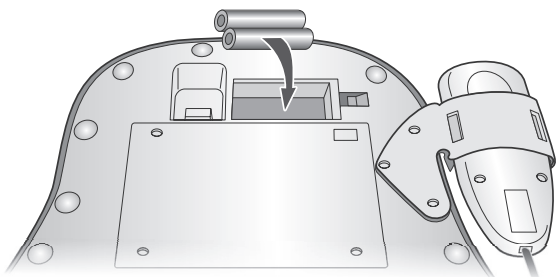

2. Установите новые источники питания, соблюдая полярность.

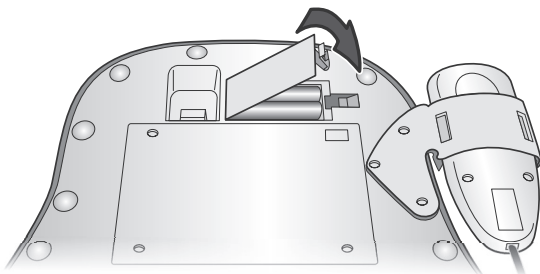

3. Установите крышку батарейного отсека.

Рис. 6. Порядок замены источников питания



Внимание! Используйте только качественные источники питания! При использовании некачественных элементов питания существует опасность самопроизвольного вытекания содержимого элементов питания, при этом возможен выход аппарата из строя (не покрывается гарантией производителя), а также риск химического ожога.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В приведенной ниже таблице приведены состояния аппарата, которые могут быть интерпретированы как неисправность и устранены самостоятельно. В случае других неисправностей свяжитесь с представителем производителя (см. раздел 11 «Гарантии изготовителя»), не пытайтесь устранить их самостоятельно.

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
1	2	3
Аппарат не включается при нажатии на кнопку	Отсутствуют элементы питания или неисправен сетевой блок питания	Установите новый комплект источников питания или замените сетевой блок питания (см. раздел «Техническое обслуживание и порядок замены источников питания»)
	Напряжение источников питания менее 2,0 В	
При включении аппарат формирует звуковые сигналы и автоматически выключается	Напряжение источников питания менее 2,1 В	Установите новый комплект источников питания (см. раздел «Техническое обслуживание и порядок замены источников питания»)
	Промежуток времени между выключением аппарата и его последующим включением менее 3 с.	

1	2	3
<p>Аппарат самопроизвольно выключается или мигает символ батареи и звучит непрерывный сигнал</p>	<p>Напряжение источников питания менее 2,1 В</p>	<p>Установите новый комплект источников питания (см. раздел «Техническое обслуживание и порядок замены источников питания»)</p>
<p>Аппарат не переходит в режим электростимуляции при наличии контакта встроенных электродов с кожной поверхностью. На ЖК-индикаторе отсутствует символ наличия контакта с кожей</p>	<p>Недостаточная площадь контакта встроенных электродов с кожной поверхностью</p>	<p>Убедитесь, что не менее 60% общего кол-ва электродов имеет плотный контакт с кожей. При необходимости увлажните кожную поверхность, контактирующую с электродами</p>
<p>Аппарат не формирует звуковые сигналы</p>	<p>На аппарате включен звук</p>	<p>Включите звук, как указано в п. 6.4.6</p>
<p>Быстрый расход источников питания</p>	<p>Некачественные источники питания</p>	<p>Использовать качественные источники питания (рекомендуется использовать щелочные источники питания) либо аккумуляторы соответствующего типоразмера с напряжением не более 1,5 В</p>

9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Максимальный ток потребления аппарата при напряжении питания $3,0 \pm 0,15$ В:


- в режиме электростимуляции — не более 300 мА;
- в выключенном состоянии — не более 100 мкА.

9.2. Масса аппарата без элементов питания:

- блока электростимуляции — не более 5000 г;
- пульта управления — не более 180 г;

9.3. Габаритные размеры аппарата, не более:


- а) пульта управления — $140 \times 55 \times 28$ мм;
- б) модуля электростимуляции — $900 \times 365 \times 70$ мм.

9.4. Аппарат автоматически выключается через 3 минуты после последнего нажатия на любую кнопку, кроме кнопки , при неиспользовании программ аппарата.

9.5. Характеристики работы аппарата:

9.5.1. Частоты следования импульсов, формируемые аппаратом: 20 ± 2 Гц, 60 ± 2 Гц, 77 ± 2 Гц, 140 ± 5 Гц, 200 ± 5 Гц.

9.5.2. Параметры отдельных импульсов воздействия:

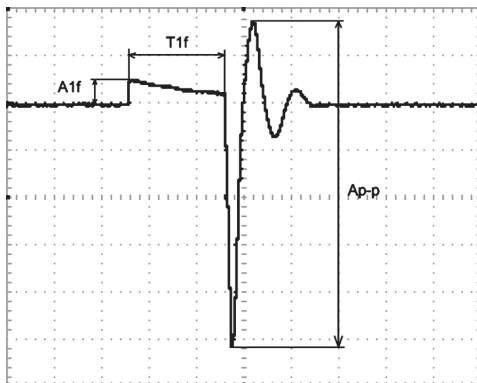

Форма импульса при подключенной нагрузке Z


При минимальной мощности сигнала:

- длительность положительной части импульса (T_{1f}) — 25 ± 10 мкс;
- амплитуда положительной части импульса (A_{1f}) не более 30 В;
- размах импульса (A_p-p) не более 70 В.

При максимальной мощности сигнала:

- длительность положительной части импульса (T_{1f}) — 250 ± 70 мкс;
- амплитуда положительной части импульса (A_{1f}) — 30 ± 10 В;
- размах импульса (A_p-p) — 190 ± 70 В.

Параметры нагрузки Z.

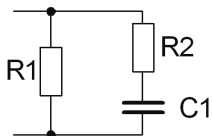

R1 — $56 \text{ кОм} \pm 10\%$ – 0,25 Вт

R2 — $470 \text{ Ом} \pm 10\%$ – 0,25 Вт

C1 — К10 – 47а – Н30 – $6200 \text{ пФ} \pm 20\%$ – 250 В

9.6. Длительность программ воздействия:

Программа	A	B	C	D
Длительность (мин.)	23 ± 1	23 ± 1	26 ± 1	10 ± 1

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат ДЭНАС-Вертебра-02 поставляется в следующей комплектации:

Наименование	Кол-во, шт.
Аппарат ДЭНАС-Вертебра-02	1
Руководство по эксплуатации	1
Салфетка ¹	10 ²
Элемент питания типа LR6/AA ¹	2 ²
Блок питания ¹	1
Потребительская тара	1

¹ Гарантия производителя аппарата на данные комплектующие не распространяется.

² Количество может быть увеличено.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие электростимулятора требованиям ТУ 9444-013-44148620-2010 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

11.2. Срок службы изделия — 5 лет.

При соблюдении правил эксплуатации срок службы может значительно превысить официально установленный.

11.3. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.

11.4. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока продавец (изготовитель) обязуется удовлетворить требования потребителя, предусмотренные Законом РФ «О защите прав потребителей».

Продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация не отвечает за недостатки, если они возникли после передачи изделия потребителю вследствие:

- 1) нарушения потребителем правил транспортировки, хранения, ухода и эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством;
- 2) механических повреждений;
- 3) действий третьих лиц;
- 4) форс-мажорных обстоятельств.

11.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с нарушенной заводской гарантийной этикеткой, находящейся в батарейном отсеке.

11.6. В случае отказа изделия или его неисправности в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности владелец изделия дол-

жен направить в адрес предприятия-изготовителя или его представителя заявку на ремонт (замену) с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, номера телефона, кратким описанием неисправности, условиями и датой ее проявления.

12. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «РЦ АРТ», 620146, Россия
г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 15
телефон: +7 (343) 267-23-30
<http://www.denascorp.ru>
e-mail: corp@denascorp.ru



ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Наименование: ДЭНАС-Вертебра-02

Серийный номер изделия _____

Дата изготовления _____

Дата покупки _____

Владелец _____

Адрес: _____

Телефон _____ домашний

_____ рабочий

Дата отправки в ремонт _____

Причина отправки в ремонт _____

Отметка о ремонте _____

Подпись должностного лица предприятия,
ответственного за приемку после ремонта _____

Изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Дата получения _____

Гарантия на отремонтированное изделие составляет 6 месяцев с момента получения изделия из ремонта. Если гарантийный срок с момента приобретения изделия составляет более 6 месяцев, то гарантия исчисляется по большему сроку. Также гарантийный срок увеличивается на время нахождения изделия в ремонте.

A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат электростимулирующий чрескожный универсальный ДЭНАС-Вертебра-02 соответствует требованиям ТУ 9444-013-44148620-2010 и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата изготовления:

Отметка о приемке:

Подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

С условиями гарантии ознакомлен, изделие проверено, претензий к комплектации, внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Дата: _____

*Внимательно осматривайте аппарат при покупке!
Дефекты корпуса или дисплея (царапины, трещины, сколы) не являются гарантийными случаями. Аппараты с такими дефектами обмену, ремонту или возврату по гарантии не подлежат.*